

# Lifeline




## **Distributeur de médicaments MedReady®**

Une façon simple, abordable et automatisée de gérer plusieurs médicaments avec une surveillance en tout temps

# Les erreurs de médicaments sont courantes et coûteuses


Vous comptez sur vos médicaments pour rester en bonne santé. Mais des horaires de prise de médicaments compliqués peuvent entraîner des erreurs : l'oubli de doses, de mauvaises quantités ou la prise de pilules au mauvais moment. Ces erreurs pourraient mener à des visites inutiles chez le médecin ou à l'hôpital.

Le distributeur de médicaments MedReady\* vous aide à éviter les erreurs de médicaments afin que vous puissiez vivre de façon autonome dans le confort de votre domicile. Notre distributeur de médicaments automatisé avec la surveillance 24 heures sur 24 est conçu pour vous aider à prendre la bonne dose au moment prescrit.

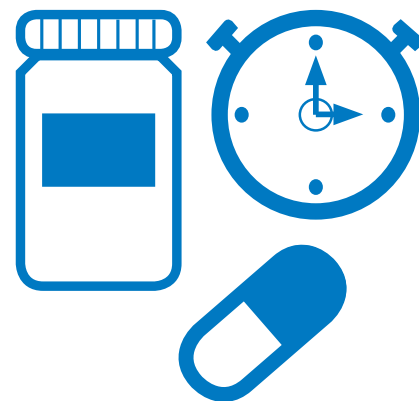

## Comment fonctionne-t-il?

- 1. Remplissage :** Avec les gabarits de dosage (1 à 4 doses par jour), ajoutez des médicaments à partir de la dose 1, puis confirmez.
- 2. Prise de médicaments :** Le plateau à pilules tourne jusqu'à la dose programmée et l'alarme sonore retentit. Ouvrez le compartiment des médicaments et récupérez les pilules.
- 3. Alertes :** L'aidant reçoit un SMS ou un courriel<sup>1</sup> si le médicament n'a pas été pris ou si le distributeur a besoin d'un dépannage.
- 4. Assistance du Centre de télésurveillance Lifeline :** Nos télésurveillants spécialement formés aideront l'aidant et enverront de l'aide au besoin.

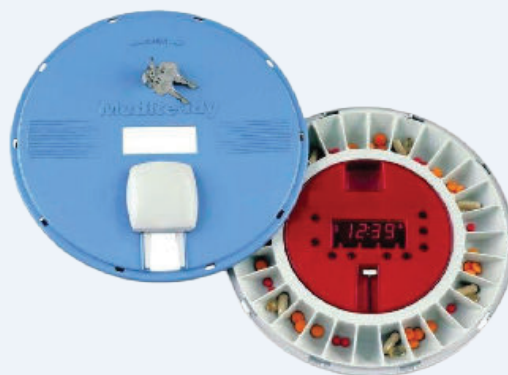

# Est-il temps de trouver une meilleure façon de gérer vos médicaments?

Utilisez cette auto-évaluation pour déterminer si un appareil de gestion des médicaments vous convient.

## Questions (cochez la case si votre réponse est « Oui »)

1. Prenez-vous trois médicaments ou plus par jour?
2. Prenez-vous des médicaments deux fois ou plus par jour?
3. Au cours du mois dernier, avez-vous oublié de prendre des médicaments?
4. Avez-vous un problème de santé chronique ou une maladie, comme une maladie cardiovasculaire, une MPOC, l'ostéoporose, le diabète ou le cancer?
5. Avez-vous besoin d'aide pour vos activités quotidiennes, comme prendre vos médicaments, vous laver, vous habiller ou cuisiner?
6. Un service hautement fiable, précis et ponctuel de distribution des médicaments pourrait-il vous rassurer et rassurer vos proches?
7. Est-ce important pour vous de continuer à vivre de façon autonome à votre domicile actuel?
8. Êtes-vous préoccupé par les complications qui pourraient entraîner des hospitalisations si vous ne prenez pas adéquatement vos médicaments?
9. Vos activités quotidiennes sont-elles limitées par votre traitement médicamenteux?

*\*Voir le tableau de droite pour connaître l'évaluation de votre note.*

6 à 9 oui :	Cette note élevée indique un risque sérieux de commettre des erreurs de médication et de subir des complications.
3 à 5 oui :	Cette note indique un certain risque de commettre des erreurs de médication et de subir des complications.
1 à 2 oui :	Posez-vous deux questions importantes : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Si je ne prends pas mes médicaments adéquatement, est-ce que je risque de subir des complications supplémentaires?</li><li>2. Si je ne prends pas mes médicaments adéquatement, est-ce que je risque de devoir quitter mon domicile pour que quelqu'un m'aide à les prendre?</li></ol>

Si la réponse est « oui » à l'une de ces questions, il serait peut-être judicieux de discuter d'un service automatisé de gestion des médicaments avec votre famille et votre fournisseur de soins de santé.

## Caractéristiques et avantages



**Facile à utiliser** : il distribue les doses préchargées à l'heure programmée<sup>2</sup>. Il suffit d'appuyer sur le compartiment pour recevoir le médicament.



**Surveillé par le Centre de télésurveillance de Lifeline** : l'assurance de savoir que les aidants sont alertés par SMS ou courriel lorsqu'une dose est oubliée. Le Centre de télésurveillance est également disponible pour aider l'aidant au besoin.



**Très fiable** : les alarmes visuelles et sonores indiquent quand il est temps de prendre le médicament et offrent un meilleur contrôle.



**Pile de secours** : la pile de secours<sup>3</sup> fiable permet de distribuer chaque dose à temps, même en cas de panne de courant.

# Pourquoi choisir Lifeline?

- ▶ Lifeline est le plus important service d'alerte médicale au Canada<sup>4</sup>.
- ▶ Les télésurveillants bienveillants et amicaux de Lifeline sont prêts à vous aider jour et nuit.
- ▶ Télésurveillance canadienne, 24 heures sur 24
- ▶ Aucun contrat à long terme.
- ▶ Le protocole à boucle fermée signifie que nous effectuons un suivi pour nous assurer que l'aide arrive toujours.
- ▶ Technologie de détection des chutes éprouvée disponible.

MedReady® est une marque de commerce déposée de MedReady, Inc

\* Ce service est offert uniquement avec les programmes Lifeline participants.

1. L'abonné ou l'aidant a besoin d'un téléphone intelligent pour s'inscrire à ce service.
2. Sous réserve de certaines limites selon la disponibilité et la couverture des services de téléphonie cellulaire du fournisseur indépendant. La portée du signal peut varier.
3. La pile de secours peut durer jusqu'à 72 heures.
4. Basé sur le nombre d'abonnés.

**1 800 LIFELINE**  
**1 800 543-3546**